

Annexe

La réfrigération, une astuce simple pour prévenir le blocage des aiguilles montées directement sur les seringues d'énoxaparine (*Pharmactuel* 2024:57:141–147)

Tableau V. Mesure de l'activité contre le facteur X des seringues d'énoxaparine réfrigérées (de 2 à 8°C) pour le biosimilaire Redesca^{MD}

Jour	Moyenne des concentrations (mg/mL) (n = 3)	Coefficient de variation
Jour 0	100,0	1,2
Jour 4	97,3	1,5
Jour 7	101,3	1,2
Jour 10	98,0	1,3

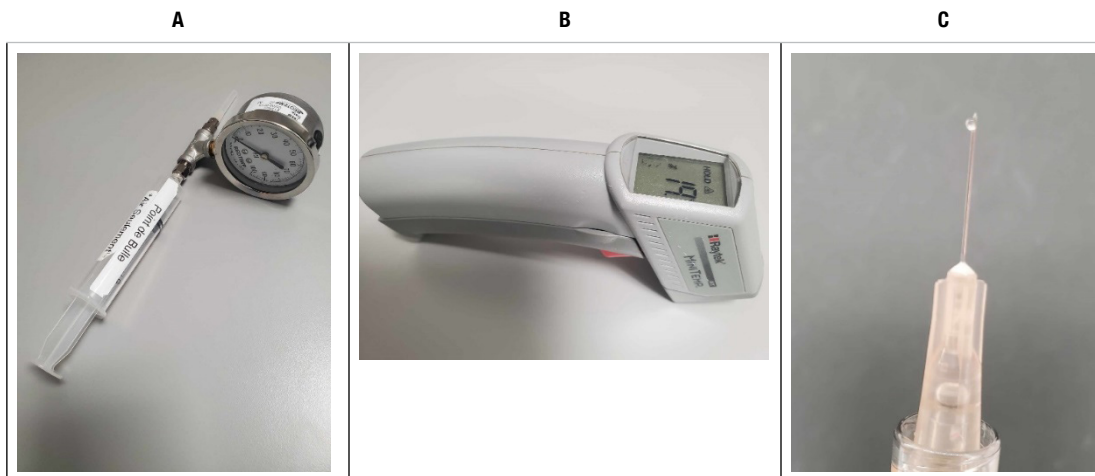


Figure 1. Appareillage et gouttes :

- A. Point de bulle modifié avec aiguille au lieu du filtre à tester.
- B. Thermomètre infrarouge de 0 à 750 °F (MiniTemp) de la marque Raytek.
- C. Exemple de goutte solide observée au bout de l'aiguille à 50 °C.